

ASIMETRÍA EN ADI

Extracciones asimétricas: 44 | 35

- **1ª Fase:** Nivelación (7-8 meses)
- **2ª Fase:** Corrección (8-10 meses)
- **3ª Fase:** Terminación (2-4 meses)



1ª FASE

Nivelación (7-8 meses)


- **Control de sobremordida**
- **Control del canino**
- **Corrección de:**
 - Apiñamiento
 - Posición vertical individual
 - Rotaciones
 - Eje de la corona clínica



1. ARCO .014 NÍQUEL TITANIO

- **Hemiarcada derecha**


- Ligadura continua de primer molar a canino (46 a 43)

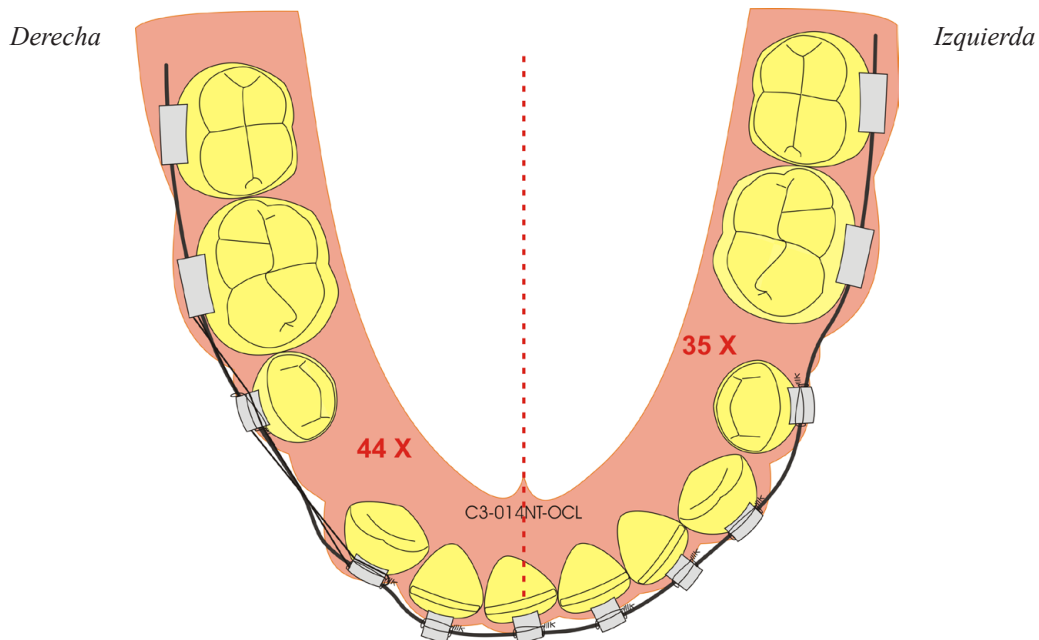

2. ARCO .014x.025 NÍQUEL TITANIO TÉRMICO

• Hemiarcada derecha


- Ligadura continua de primer molar a canino (46 a 43)

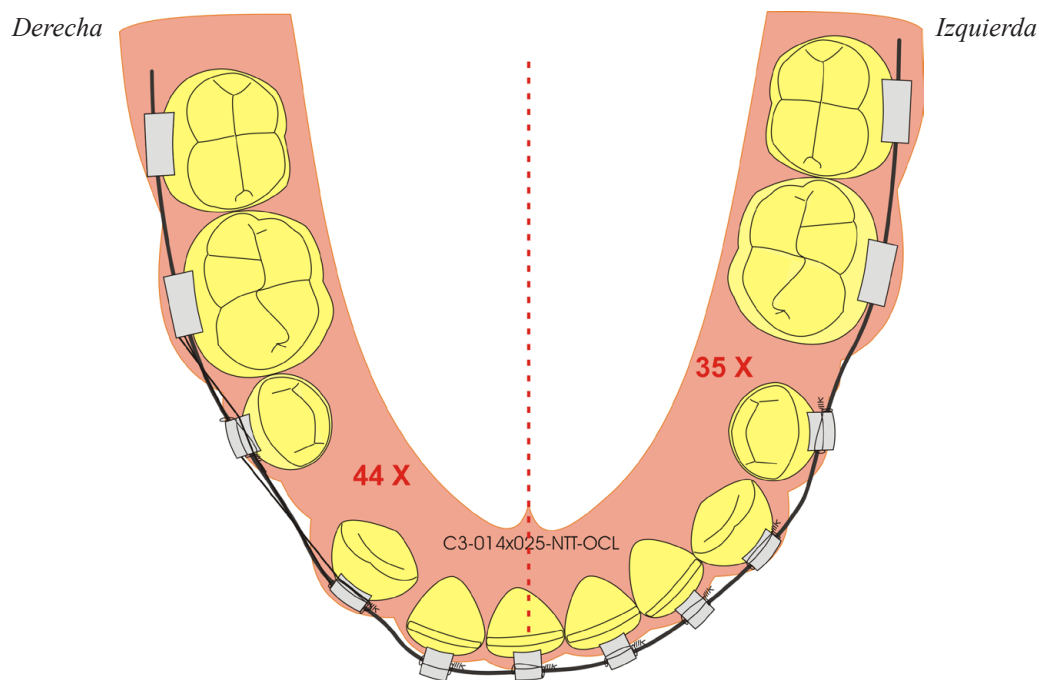

3. ARCO .016x.025 NÍQUEL TITANIO TÉRMICO

- **Hemiarcada derecha**

- Ligadura continua de primer molar a canino (46 a 43)

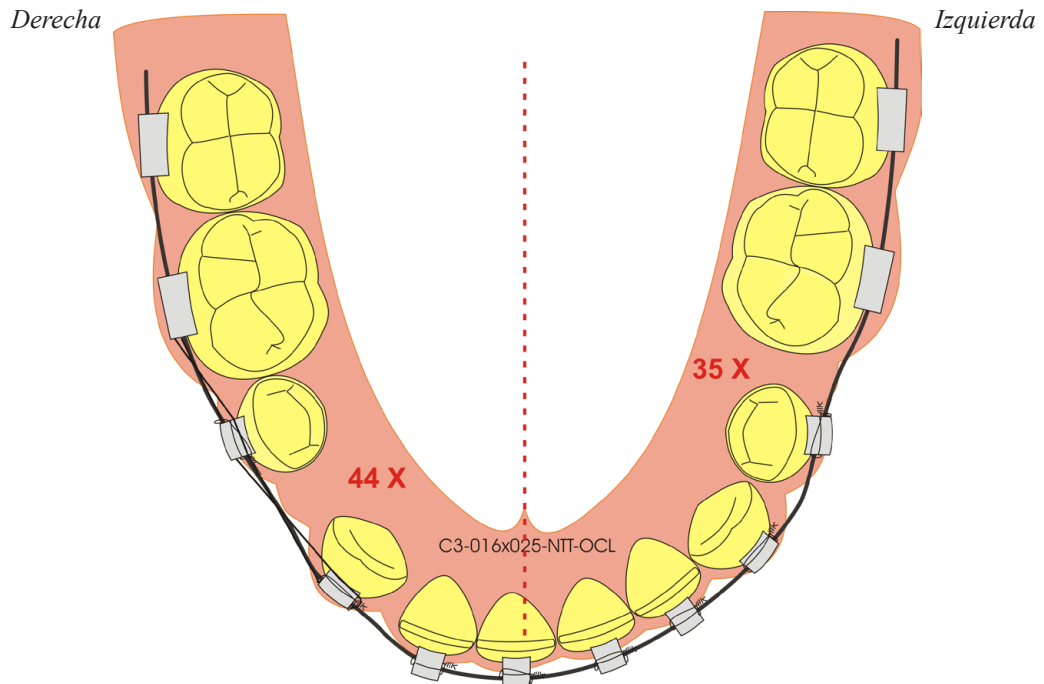

2ª FASE

Corrección (8-10 meses)

- **Corrección de:**

- Articulación cruzada posterior
- Guía incisiva
- Guía canina
- Línea media
- Cierre de espacios




4. ARCO .017x.025 β -TITANIO

• Hemiarcada derecha


- Ligadura continua de 1º molar a 2º premolar (46 a 45)
- Módulo del segundo molar al canino (47 a 43)

• Hemiarcada izquierda


Derecha

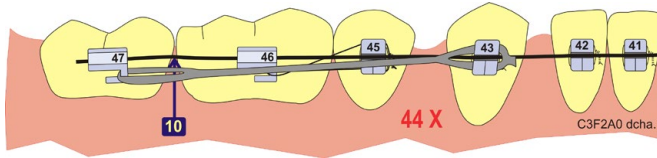

Izquierda

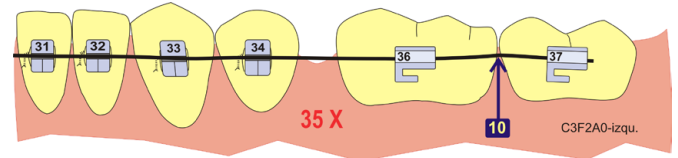

Derecha

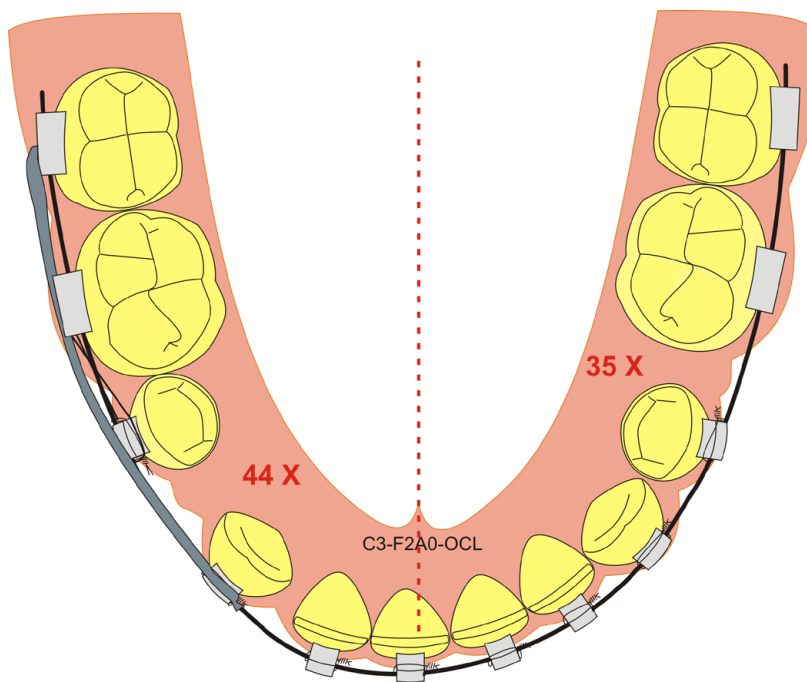

Izquierda



5. ARCO .017x.025 ACERO CON POSTES


- **Hemiarcada derecha**

- Módulo de segundo molar al poste


- **Hemiarcada izquierda**

- Módulo de primer molar al poste


Derecha

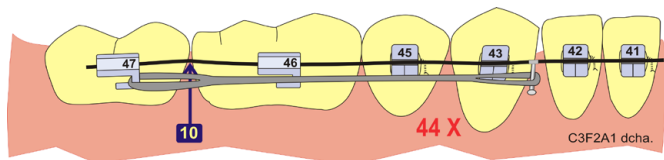

Izquierda

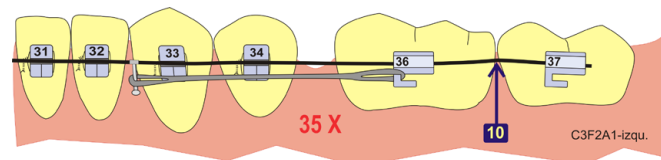

Derecha

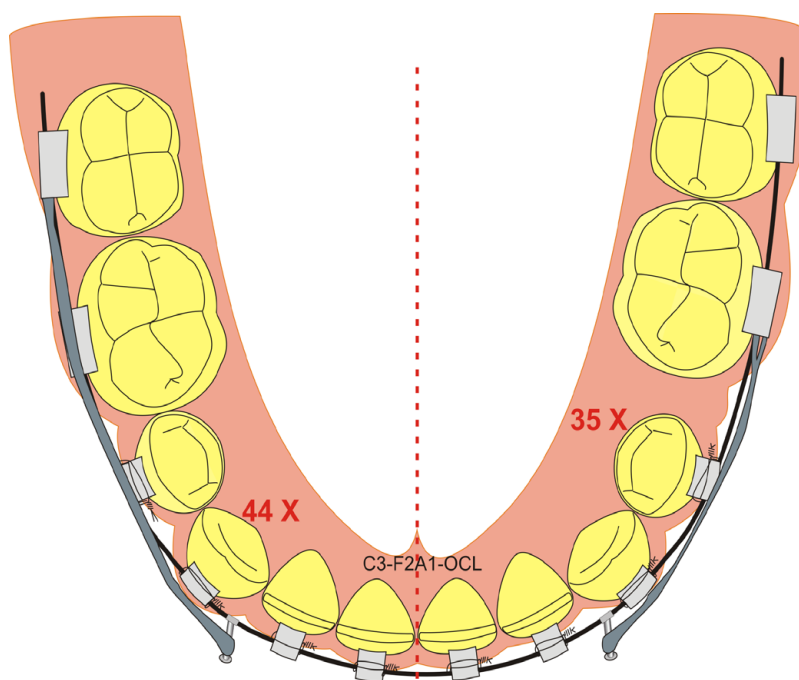

Izquierda



6. ARCO .017x.025 ACERO CON POSTES


• Hemiarcada derecha

- Ligadura continua de primer molar a canino (46 a 43)
- Módulo del segundo molar al poste


• Hemiarcada izquierda

- Módulo de segundo molar al poste
- Ligadura continua de primer molar a canino (36 a 33)


Derecha

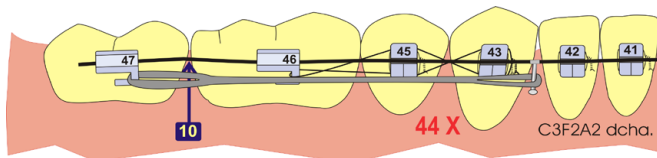

Izquierda

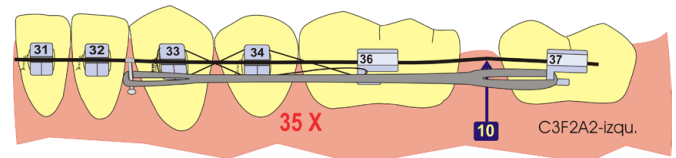

Derecha

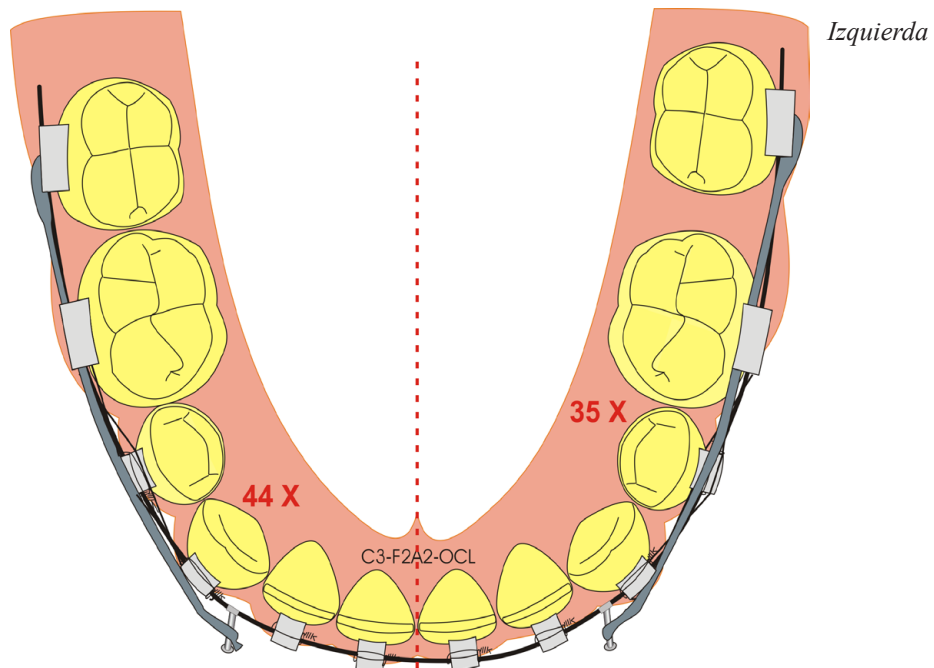

3ª FASE

Terminación (2-4 meses)


- Intercuspidación



7. ARCO .019x.025 β -TITANIO

- Hemiarcada derecha e izquierda

- Ligadura continua de primer molar a primer molar (46 a 36)

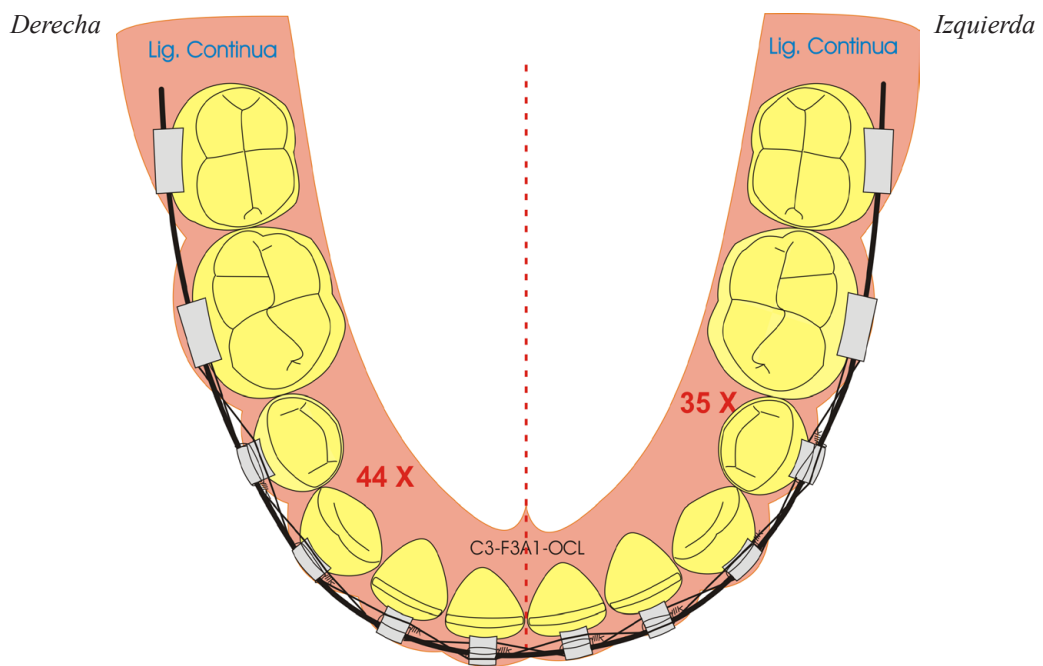



Aeronáuticas, 18-20. Polígono Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid) - ESPAÑA

Telf. 91 554 10 29

www.ortocervera.com | cursos@ortoceosa.com
